



Vakuummatten für OP-Lagerung




Vakuum-Matratzen und -Kissen für Positionierung und Lagerung der Patienten während der Operation

- Passt sich der Körperkontour an
- Optimale Druckentlastung
- Einfaches, schnelles und sicheres Handling

VORTEILE:

- Vermeidung von Folgeschäden wie Dekubitus und Paresen
- Optimaler Zugang für den Chirurgen zum Operationsfeld
- Exzellenter Komfort für den Patienten
- Verbesserte Effizienz im OP-Raum
- Ermöglicht interklinische Transporte in definierter OP-Lage

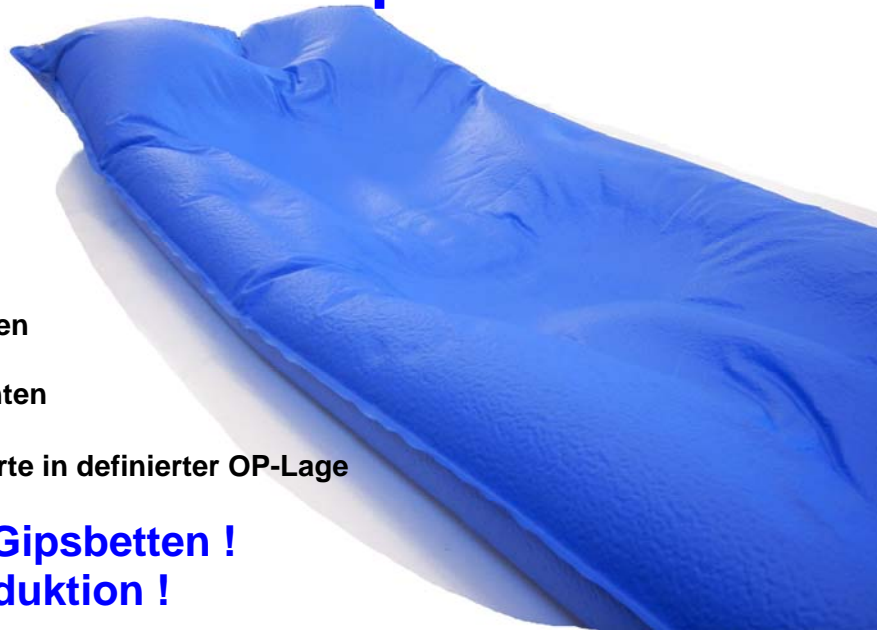

**Die moderne Alternative zu Gipsbetten !
- bietet eine große Kostenreduktion !**

Indikationen zur Anwendung des MedVac Vakuumsystems während Operationen:

- Seitenlage
- Halbseitenlage
- Rückenlage
- Sitzende / halbsitzende Position
- Schraubenlage
- Steinschnittlage
- Laparoskopische Lagerungen


Gebrauch:

- Das innere Granulat soll gleichmäßig verteilt werden
- Die Matte geringfügig vakuumisieren
- Den Patienten auf die OP-Matte legen
- Etwas Luft in die Matte einlassen
- Den Patienten in die gewünschte Position bringen
- Luft absaugen bis die Matte fest ist

Eigenschaften aller MedVac Produkte:

Außenhülle aus Spezial-TPU-Film:

- Sehr strapazierfähiges Material - garantiert hohe Lebensdauer
- Seidenweich und angenehm für den Patienten
- Einfach zu reinigen und zu desinfizieren
- Biokompatibel, Frei von PVC und Latex

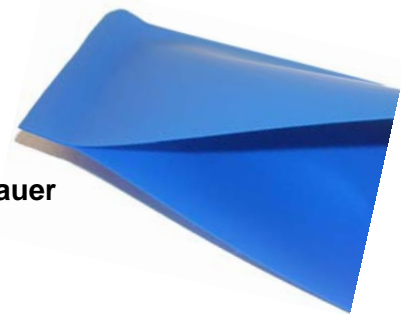

Vakuumventile schließen automatisch

- Die robusten Vakuumventile schließen automatisch nach dem Absaugen
- Kein Vakuumverlust



Kennzeichnung:


- Etikett mit Seriennummer und CE-Kennzeichnung
- Optionales Etikett mit Bedienungsanleitung des Ventils
- Optionale Etiketten mit Eigentumskennezeichnung

Röntgen-, CT- und MRI-kompatibel. CE-gekennzeichnet



MedVac OP-Matratzen und OP-Kissen


OP-Matratzen, Körpergröße:

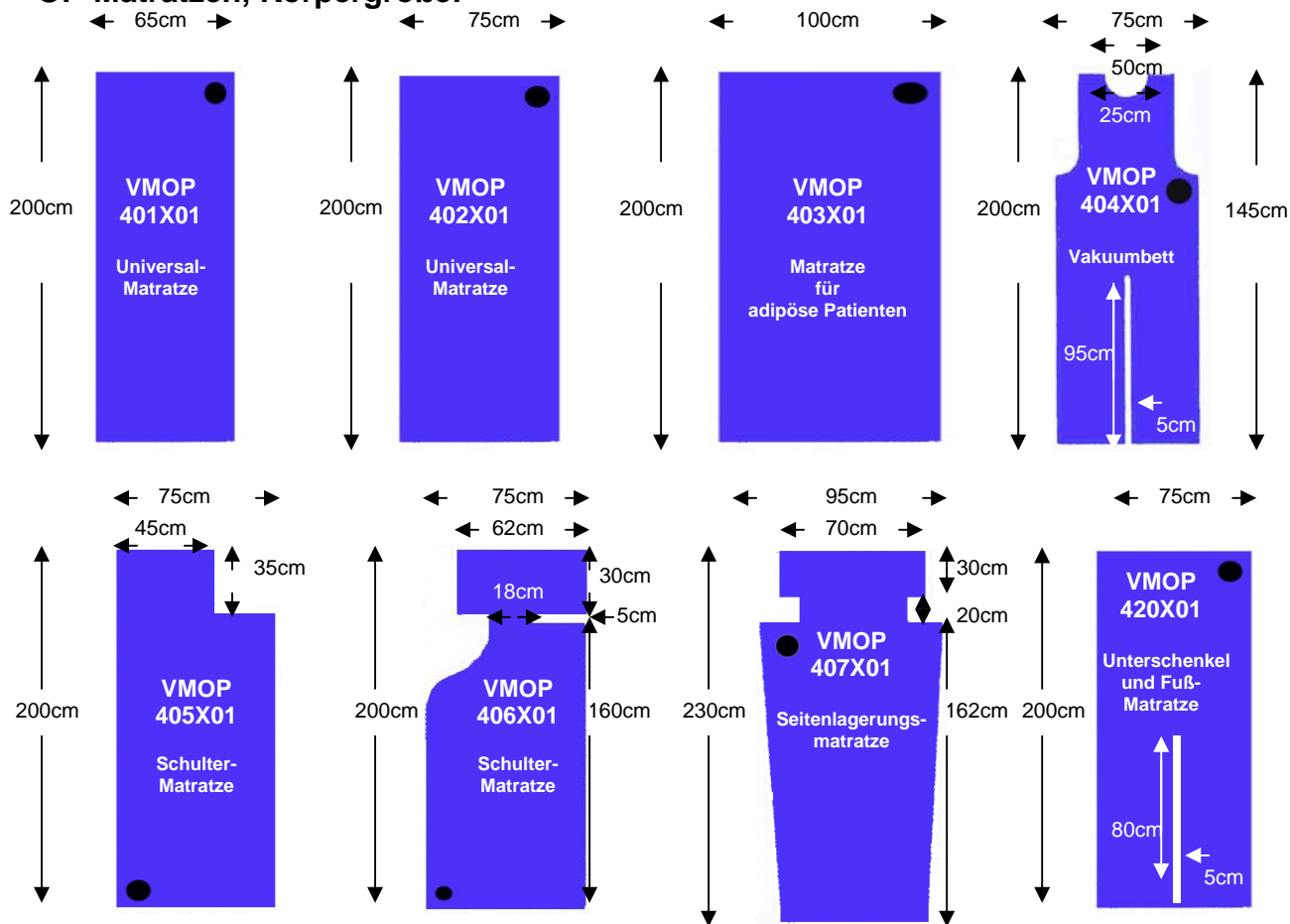


OP-Matratzen, kurz:

Kurze Matratzen mit Ausschnitt:

Kurze Matratzen:

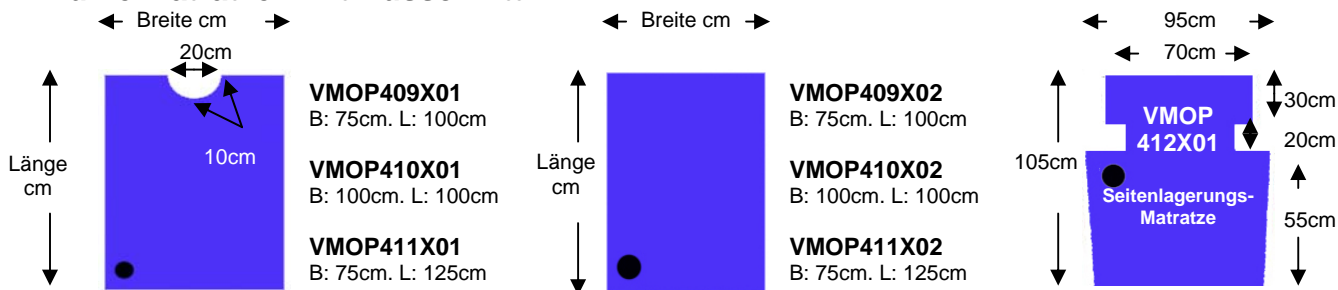

OP-Kissen:

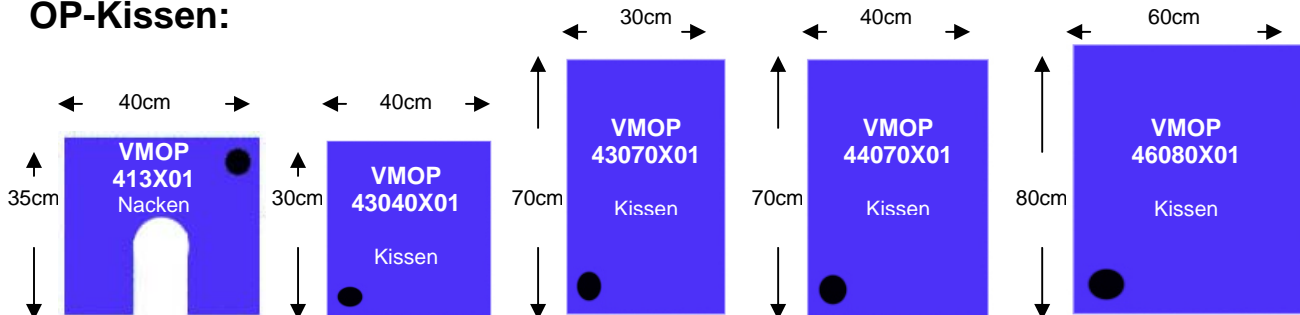

The logo for Kohlbrat & Bunz features the company name in a bold, black, sans-serif font. The ampersand is enclosed in a red oval. The entire logo is framed by a large, red, curved line that forms an open oval shape.

KOHLBRAT & BUNZ

*Medical Products
Made in Austria*

**Qualitätsmanagement gemäß
EN ISO 9001 & EN ISO 13485
zertifiziert durch TÜV Austria**



made by

**KOHLBRAT & BUNZ GMBH
Loretostrasse 4-8
A-5550 Radstadt, Österreich
T: +43-(0)6452-7193-0
F: +43-(0)6452-7193-51
E: office@kohlbrat-bunz.com
www.K-B.at**

Vacuum mats for Surgical Bedding



Vacuum mats for patient positioning during surgery

- Conforms to each patients body and body part
- Removes pressure points
- Quick, safe and easy positioning

Great benefits:

- Effective prevention of decubitus and paresis
- Optimum access for the surgeon to the operating site
- Excellent patient comfort
- Improved efficiency in the operating room
- Making Inter-clinic transportation in defined surgical position possible
- Can be used as reusable alternative to plaster beds

resulting in **GREAT COST SAVINGS**



Indications to use the MedVac vacuum positioning system during surgery:

- Side position
- Half-side position
- Back position
- Sitting / half- sitting position
- Coiled position
- Lithotomy position
- Laparoscopic positions


How to operate the MedVac system:

- Make sure the inner granulate material is evenly distributed and the vacuum mat is flat
- Vacuum the mat slightly
- Place the patient on the mat
- Open the valve to let a little air into the mat making it soft
- Put the patient in the required position
- Vacuum the mat until it is firm

Features of all MedVac products:

Special biocompatible high quality polyurethane film:

- Durable, colourfast material guarantees long life
- Soft as silk on the patient, still extremely tough and puncture resistant
- Clean design without places that can trap fluids and dirt makes it very easy to clean and disinfect.
- Biocompatible, free from PVC and latex

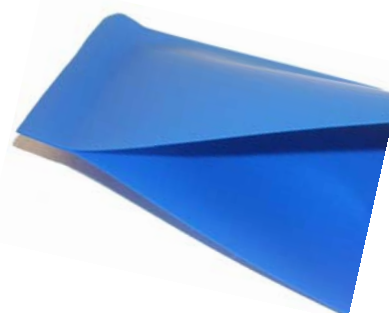

Automatic vacuum valves:

- The vacuum valves close automatically when suction stops
- No risk of losing vacuum if slipping with the vacuum pump



Labels on every product:


- Individual label with ID-number
- Label with instruction how to operate the valve (optional)
- Label with distributor logo and information (optional)
- Label with customer logo and information (optional)



Compatible with X-ray, CT and MRI. CE marked


MedVac Surgical Vacuum Mattresses :

Surgical mattresses, body size:

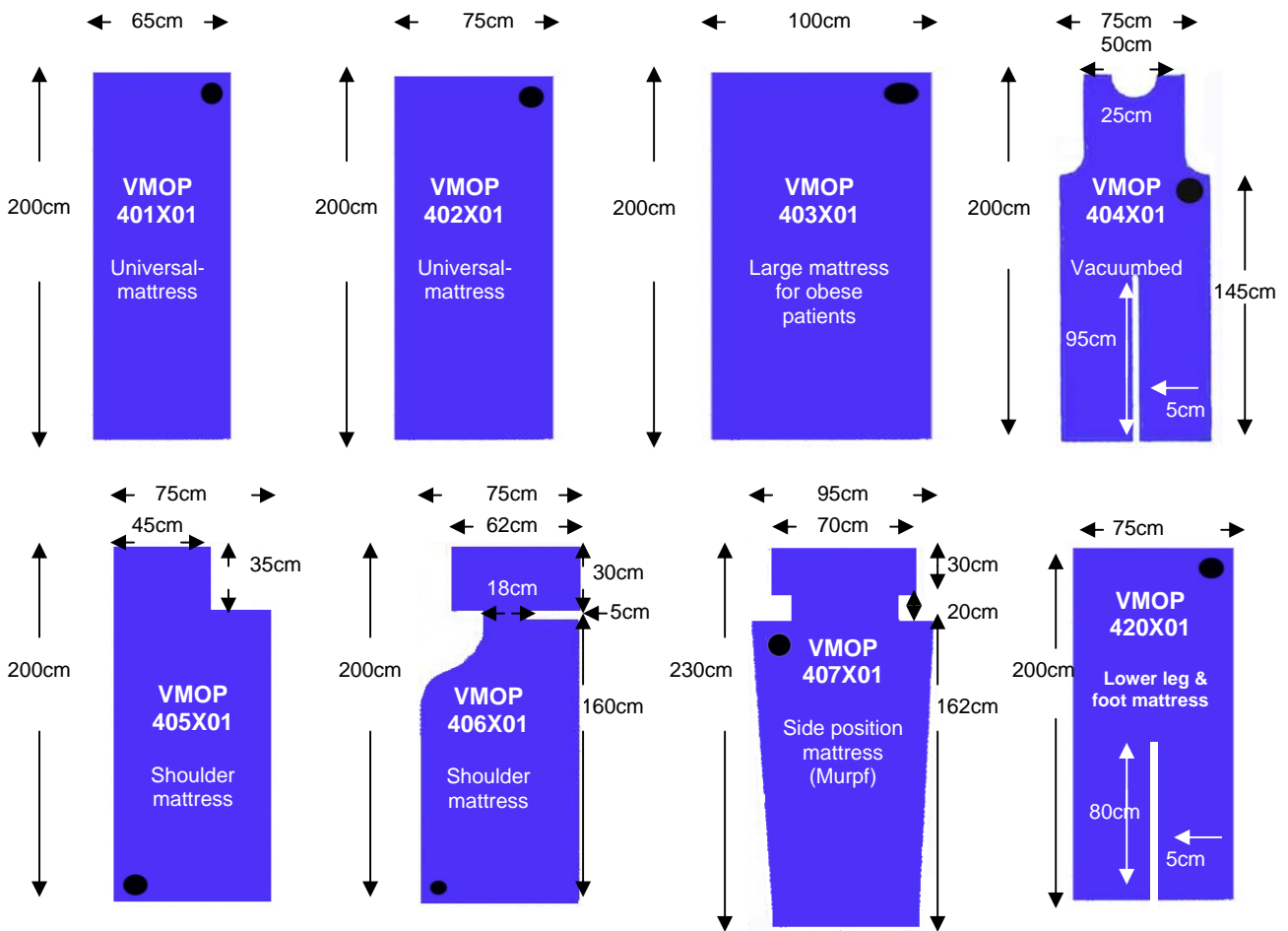


Short surgical mattresses:


Short mattresses with cut out:

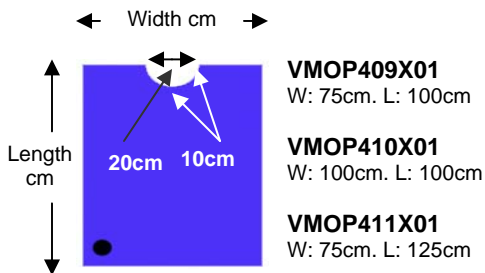

Short mattresses:

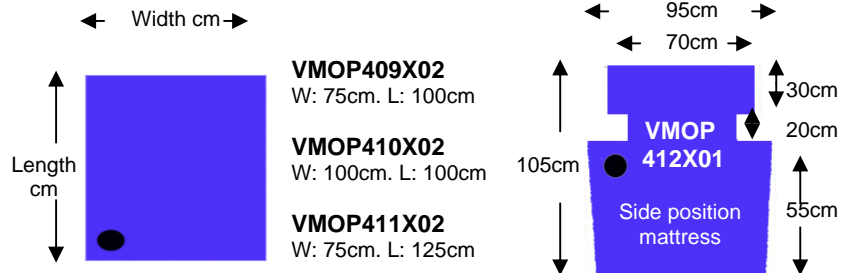

Surgical cushions:

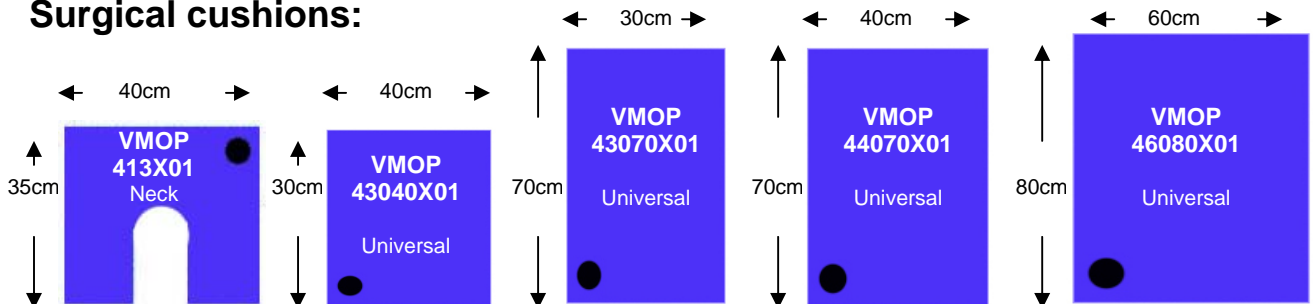

The logo for Kohlbrat & Bunz features the company name in a bold, black, sans-serif font. The ampersand is enclosed within a red oval. The entire logo is framed by a large, red, curved swoosh that starts above the text and ends below it, creating a dynamic, open-ended shape.

KOHLBRAT & BUNZ

*Medical Products
Made in Austria*

**Quality Management according to
EN ISO 9001 & EN ISO 13485
certified by TÜV Austria**



made by

**KOHLBRAT & BUNZ GMBH
Loretostrasse 4-8
5550 Radstadt - Austria
T: +43-(0)6452-7193-0
F: +43-(0)6452-7193-51
E: office@kohlbrat-bunz.com
www.kohlbrat-bunz.com**